

LITS POUR BÉBÉS, ENFANTS ET JUNIORES



2016



CONTENU

Lits pour bébés, enfants et juniores	1
2016	1
Contenu	2
Lits pour bébés.....	3
Berceau	3
Panier.....	6
Lits nourrisson	7
3165 Série: Lits nourrisson haut/bas.....	7
3134/3135 série sinne-bêdsje	9
Lits Junior	13
Opticare Nova Junior:.....	13
Lit junior avec rails en forme ciseaux, adaptable à une main.....	14
Lit junior, avec rails laterales adaptable à 1 main	15
Matelas	16
Matelas anis.....	16
Matelas Mentha	17

LITS POUR BÉBÉS

BERCEAU

NUMÉRO D'ARTICLE 3181.0201 BERCEAU HAUTEUR FIXE 84CM



- 4 roues pivotables double, diam 75 mm, dont 2 prévues de freins
- laqué en couleur à préciser
- Dimensions 774 x 454 mm
- Hauteur fixe 84 cm
- Exclusif panier pour berceau

NUMÉRO D'ARTICLE 3181.1211 BERCEAU ADAPTABLE EN HAUTEUR



- 4 roues pivotables double, diam 75 mm, dont 2 prévues de freins
- laqué en couleur à préciser
- Dimension 774 x 454 mm
- Adaptable en hauteur à l'aide d'un ressort à gaz; 69-96 cm
- Réglage T / AT simple du berceau est possible
- Exclusif panier pour berceau

NUMÉRO D'ARTICLE 3170.0002 BERCEAU À HAUTEUR FIXE CLASSIQUE

- 4 roues pivotables double, diam 100 mm, dont 2 prévues de freins
- laqué en couleur à préciser
- Dimension 774 x 454 mm
- Frame epoxy RAL 9002, gris perle
- Tablette en Volkern sur le cadre
- Exclusif panier en plexiglas pour berceau

NUMÉRO D'ARTICLE 3170.0003 BERCEAU À HAUTEUR FIXE CLASSIQUE

- 4 roues pivotables double, diam 100 mm, dont 2 prévues de freins
- Frame epoxy RAL 9002, gris perle
- Armoire fermable sur le cadre
- Exclusif panier en plexiglas pour berceau

NUMÉRO D'ARTICLE 3170.0005 WIEGKORFONDERSTEL VASTE HOOGTE CLASSIC

- 4 roues pivotables double, diam 100 mm, dont 2 prévues de freins
- Frame epoxy RAL 9002, gris perle
- Barre ciel (exclusif ciel)
- Exclusif panier en plexiglas pour berceau

NUMÉRO D'ARTICLE 3181.1300 WIEGKORFONDERSTEL MET HOOG/LAAG
VERSTELLING



- Dimensions (exclusif panier) 85 x 54 cm
- Sol de lit maximale ca. 65 cm
- Adaptable en hauteur 94-117 cm, par ressort de gaz
- Hauteur plaque de lit (exclusif matelas) 76-99 cm
- Réglage T / AT simple du berceau est possible, ca. 15°, traploos
- 4 roues double et pivotables double, diam 75 mm, dont 2 prévues de freins
- laqué en couleur à préciser
- Optionnel: Barre ciel (exclusif ciel)

PANIER

NUMÉRO D'ARTICLE 0163.0355

- Panier libre
- Le sol de lit est prévu de trous de ventilation
- Les bords du panier au bout sont arrondis pour faciliter de soulever et porter
- Sol dimensions intérieur 350 x 650 mm
- Hauteur tête 300 mm.

LITS NOURRISSON

3165 SÉRIE: LITS NOURRISSON HAUT/BAS



C'est probable notre lit le plus petit, mais les possibilités sont énorme. Ceci parce que la structure est si bien pensée. Tous les détails du lit nourrisson sont développé afin d'offrir le confort maximal aux patients pédiatriques. Flexibilité et facilité d'utilisation sont les mots clés.

User Centered Industrial Design UCID®

Le lit nourrisson est vite adaptable en hauteur, avec un mécanisme à manivelle au pied du lit. La surface de couchage, qui est inclinable de 12°, d'aluminium perforé, est complètement déposable.

Aux deux côtés latérales se trouve un rail latéral scrollable en bas, avec quatre positions d'hauteur, livrable en Plexiglas ou barres. Tête et pied sont prévu de pièces facilement amovibles.

Toutes ces caractéristiques rendent ce lit nourrisson très confortable dans l'utilisation quotidienne.

Le lit est parfaitement accessible pour le personnel médical et soignant, et les parents.

SPÉCIFICATIONS

- La surface de couchage d'aluminium perforé, déposable
- Dimensions surface de couchage (intérieur): 93 x 52 cm
- Adaptable en hauteur (mécanique) 70 - 90 cm
- Rails latéraux scrollable de Plexiglas transparente ou barres, en 4 positions d'hauteur: 48 cm (vis à vis la surface de couchage), 35cm, 20cm et 7cm
- Tête et pied prévu des pièces amovibles (Plexiglas ou barres)
- Surface de couchage adaptable de 12°
- 4 roues pivotables, Ø 125 mm, dont 2 en croix prévu de frein
- Parties en métal époxyé dans nombreuses de couleurs (à déterminer)
- Le lit nourrisson peut être prévu d'une barre ciel ou porte-sérum (optionnel)



3134/3135 SÉRIE SINNE-BÊDSJE



LE LIT ENFANT IDEAL

Les conditions de travail deviennent de plus en plus important. Hauteur de travail et ergonomie sont essentiel pour les agents de santé et sécurité. Les matériaux dont les infirmières travaillent, doivent répondre au plus hauts exigences. Heureusement les techniques modernes, intelligemment utilisés, sont capable de répondre à ces exigences. Aussi le Sinne-bêdsje: un lit enfant innovant, adaptable en hauteur, avec des barres latérales qui tournent sous le lit en position le plus bas.



Idéal pour le Sinne-bêdsje est l'adaptation haut/bas; dépendant de la longueur de l'infirmière ou le type de travaux qu'il/elle doit faire, le lit peut être adapté en haut ou en bas sans des interruptions. L'hauteur du sol de couchage puisse être adapté à l'aide d'un mécanisme à manivelle, ou encore plus facile, électroniquement, de 96 jusqu'à 76 cm, tandis que l'hauteur effective et la sécurité des rails latérales reste toujours le même. En longueur il y a deux modèles: 120 et 150 cm.



mécanisme à manivelle
haut/bas
Optionnel: électrique



Roues diamètre 150 mm



Pièces tête/pied amovibles
(barres ou plexiglas)



Barres latérales adaptable en 3
positions: haut, demi-haut et
bas



Manipulation barres latérales
par pied



Support pied central pour
bloquer les roues

ESPACE POUR JAMBES

Recevez vous parfois des plaintes des parents, parce qu'il est si difficile de pouvoir s'asseoir proche au lit de leur enfant, quand les barres latérales sont en position plus bas? Connaissez vous le sentiment de vos genoux, poussés contre les rails, quand vous traitez ou lavez vos petits patients? Le Sinne bêdsje y tient compte! Dans la position plus bas les barres latérales tournent sous le sol du lit. Les parents puissent se relaxer plus et s'asseoir plus proche de leur enfant et les infirmières ont plus d'espace pour bouger.



ESPACE TÊTE

Si une pièce de tête ou pied est enlevé, il n'y a plus d'obstacles horizontales dont on peut pousser sa tête. Le Professional a liberté de bouger maximale, pour un traitement optimale.



APPROUVÉ EN PRATIQUE

Le Sinne-bêdsje est fortement testé en pratique. Surtout l'adaptation en hauteur, l'espace pour les jambes sous le lit, et les aspects de sécurité ont reçu beaucoup d'admiration pendant ces tests. Le Sinne-bêdsje répond aux normes internationaux. Supplémenté avec un design attractive, avec des couleurs fraîches Oostwoud a choisi un autre chemin, sans oublier la qualité, fonctionnalité et des prix compétitifs comme vous avez l'habitude de nous.

NOMBREUSES DE POSSIBILITÉS

Le Sinne-bêdsje est standard déjà très complexe. Pour encore plus de fonctionnalité vous pouvez choisir de nombre d'extras.

Standard:

- Adaptable en hauteur (mécanique)
- Ajustement AT avec ressort au gaz
- Frein central, inclusif roue de direction
- Roues pivotables Ø 150mm, dont 1 antistatique
- Pièces tête/pied amovibles (barres ou plexiglas)
- Rails latérales qui tournent sous le sol du lit, avec ressort au gaz
- Manipulation des rails latérales, en sécurité d'enfants complet
- Ajustement des rails latérales en 3 positions: haut, demi-haut et bas
- Position plus haut des rails latérales: 800mm
- Espace entre barres 60mm
- Choix de longueur de sol du lit de 120 ou 150 cm

Optionnel:

- Adaptable en hauteur électronique
- Ajustement des rails latérales en 2 positions: haut et bas
- Support de sac d'urine
- Support d'accessoires
- Support de perfusion
- Matelas
- Barre pour pousser/tirer pour côté tête ou pied
- Barres pour des pompes électroniques pour infusion
- Ajustement T-/AT avec ressort au gaz
- Hauteur fixe (pas d'ajustement haut/bas possible)



LITS JUNIOR

OPTICARE NOVA JUNIOR:

LIT JUNIOR AVEC BARRES



- Surface de couchage en deux parties 170/190 cm avec rallonge lit intégré (20cm).
- Ajustement hydraulique haut/bas par pédale-pompe des deux côtés
- La partie du dos est ajustable par ressort au gaz
- Ajustement T/AT (12°/12°)
- Frein centrale avec roue de direction
- Diamètre de roue 150 mm.
- Les pièces de tête et pied sont complètement amovible
- Le lit est livrable avec 3 types de barres latérales

A cause des raisons de sécurité le lit junior n'est pas livrable avec des commandes électriques.

LIT JUNIOR AVEC RAILS EN FORME CISEAUX, ADAPTABLE À UNE MAIN



- Surface de couchage en 2 parties 170/190 cm, avec rallonge de lit intégré (20cm)
- Ajustement hydraulique haut/bas par pédale-pompe des deux côtés
- La partie du dos est ajustable par ressort au gaz
- Ajustement T/AT (12°/12°)
- Frein centrale avec roue de direction
- Diamètre de roue 150 mm.
- Les pièces de tête et pied sont complètement amovible
- Le lit est livrable avec 3 types de barres latérales

A cause des raisons de sécurité le lit junior n'est pas livrable avec des commandes électriques.

LIT JUNIOR, AVEC RAILS LATÉRALES ADAPTABLE À 1 MAIN

Nouveau modèle



- Surface de couchage en 4 parties 170/190 cm, avec rallonge de lit intégré (20cm)
- Ajustement hydraulique haut/bas par pédale-pompe des deux côtés (80-40 cm)
- La partie du dos est ajustable par ressort au gaz
- partie cuisses et partie chevreuil, séparément ajustable
- Ajustement T/AT (12°/12°)
- Frein centrale avec roue de direction
- Diamètre de roue 150 mm.
- Les pièces de tête et pied sont complètement amovible


Commande électronique est en option.

MATELAS

MATELAS ANIS

LE CONCEPTE

Ceci est un matelas confortable, souple avec bon support qui puisse être utilisé des deux côtés. Le matelas est approprié pour utilisation générale.

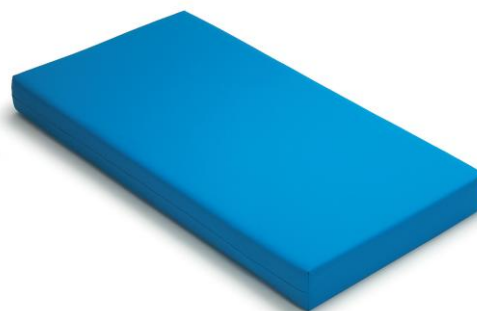

LE NOYAU

le noyau du matelas consiste d'un mousse CHMR avec une densité de 40kg/m³ et est très élastique. Le matelas répond au norme anti-feu BS 5852 part. 2, Crib 5.

LA HOUSSE

La housse en polyuréthane dispose d'une perméabilité à la vapeur excellente, Classe B. La housse est élastique en largeur et en longueur. La respirabilité en deux directions donne une bonne évacuation de chaleur, ce qui crée un climat agréable pour la peau. La housse est 100% étanche aux liquides.

NETTOYAGE

La housse est simple à nettoyer et puisse être nettoyé avec presque tout les pH neutre produits. Pour désinfecter nous recommandons une solution de 70% d'alcool. Ce matelas peut être acheté dans une version auto-lavable.

DIMENSIONS

L'épaisseur standard de ce matelas est 10 cm. Bien sûr d'autres dimensions sont disponible sur demande.

MARQUE CE

Tout nos produits sont prévu du Marque CE.

MATELAS MENTHA

LE CONCEPT

Ceci est un matelas souple et bien supportable qui puisse être utilisé de deux côtés. Le matelas est approprié pour utilisation générale.



LE NOYAU

le noyau du matelas consiste d'un mousse CHMR avec une densité de 50kg/m³ et est très élastique. Le matelas répond au diverse normes anti-feu (BS 5852 part. 1, MVSS 302 en EUFAC-label).

LA HOUSSE

La housse en polyuréthane dispose d'une perméabilité à la vapeur excellente, Classe C. La housse est élastique en largeur et en longueur. La respirabilité en deux directions donne une bonne évacuation de chaleur, ce qui crée un climat agréable pour la peau. La housse est 100% étanche aux liquides.

NETTOYAGE

La housse est simple à nettoyer et puisse être nettoyé avec presque tout les pH neutre produits. Pour désinfecter nous recommandons une solution de 70% d'alcool. Ce matelas peut être acheté dans une version auto-lavable.

DIMENSIONS

L'épaisseur standard de ce matelas est 10 cm. Bien sûr d'autres dimensions sont disponible sur demande.

MARQUE CE

Tout nos produits sont prévu du Marque CE.