



## BARTON MEDICALE XXL I - SÉRIES

La chaise Barton® est conçue pour permettre le transfert de patients lourds en position allongée, ainsi que leur déplacement en position allongée ou assise grâce à sa fonction de repositionnement rapide.

Elle peut être utilisée dans les Centres Hospitaliers, les établissements spécialisés ou en hospitalisation à domicile..



Modèle I-700



Grace à sa fonction de transfert intégré, la chaise Barton® permet le transfert latéral d'un patient lourd par un seul opérateur

Le poids maximal du patient du modèle I-700 est de 315 kg pour une largeur de siège de 680 mm.

## Fonctionnalités du fauteuil Barton®



1 Le réglage de la position inclinée du fauteuil est facile et rapide



Tête réglable avec support latéral 2



3 Le système de freins centralisé s'utilise en toute sécurité



L'accessoire de transfert Barton® se positionne facilement sur la plupart des lits d'hôpitaux et des civières 4




5 Réglage en hauteur du fauteuil

### Points forts:

- plusieurs modèles disponibles
- nombreuses possibilités de réglage des parties mobiles
- pieds maintenus parfaitement bloqués
- supports genoux indépendants et confortables
- autonomie complète et confort maximal de l'utilisateur

## Opérations de transfert

Le système de transfert Barton® d'un patient en position allongée est un système exclusif

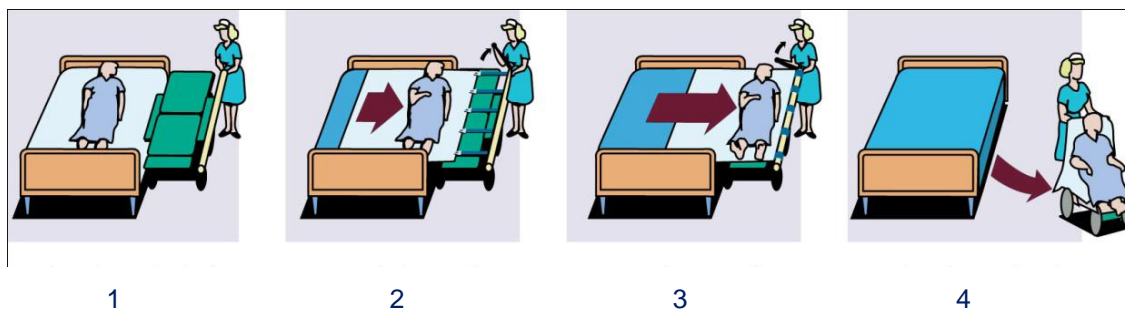

1. Placer la chaise à côté du lit en position horizontale
2. Fixer la chaise
3. Transférer le patient en tournant la poignée
4. Incliner la chaise pour asseoir le patient

### Accessoires

- Poignées à fixer sur plateau et poignées intérieures
- Support dorsal amovible et réglable en hauteur, profondeur et en angle
- Support amovible d'appui antérieur, à hauteur et profondeur réglables
- Sangle de maintien dorsal
- Sangles de fixation des pieds en velcro
- Coussin latéral de hanche fixé sur la barre d'appui droite ou gauche
- Support d'appuis genoux en une partie
- Télécommande buccale